MED EL



ADHEAR

Quick Guide

AW41090_1.0 (German)

Inhaltsverzeichnis

ADHEAR System 1
Ein-/Ausschalten des ADHEAR. 2
Batteriefachsperre 3
Batteriewechsel 4
Anbringen des Klebeadapters 5
Anbringen des Audioprozessors 9
Abnehmen des Audioprozessors 10
Wechseln des Klebeadapters. 11
Ändern des Programms. 12
Ändern der Lautstärke 13
Verbinden des ADHEAR mit externen Geräten 14
ADHEAR Zubehör 15
Pflege des ADHEAR Systems 16

Der ADHEAR Quick Guide enthält einfache Anweisungen zur Verwendung Ihres ADHEAR. Für detaillierte Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, den Indikationen, den Kontraindikationen, den Warnhinweisen und den Vorsichtsmaßnahmen für das ADHEAR System, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

© 2017–2020 MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH. Dokumentenrevision 1.0 (Ausgabe 08/2020).
Alle Rechte vorbehalten.

ADHEAR System



Ein-/Ausschalten des ADHEAR



1 Setzen Sie eine Batterie ein, und schließen Sie das Batteriefach vollständig, um den Audioprozessor einzuschalten. Das Pluszeichen (+) muss nach oben zeigen.



2 Öffnen Sie das Batteriefach, und/oder entfernen Sie die Batterie, um den Audioprozessor auszuschalten. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollten Sie das Batteriefach öffnen, wenn Sie den Audioprozessor nicht verwenden.

Batteriefachsperre



Batteriefach sperren



Batteriefach entsperren



Entsperrt



Gesperrt

Legen Sie den ADHEAR auf eine gerade Oberfläche (z.B. Tisch) und drehen Sie ihn um, so dass Sie das MED-EL Logo sehen können.

! Verwenden Sie zum Sperren/Entsperren nur den mitgelieferten Schraubenzieher. Andere Schraubenzieher könnten den ADHEAR beschädigen.

Batteriewechsel


Entnehmen Sie die leere Batterie und legen Sie eine neue ein (siehe Seite 3). Entfernen Sie die Folie, um die Batterie zu aktivieren.

Es wird empfohlen, die Folie ein bis zwei Minuten vor dem Einlegen der Batterie zu entfernen. Diese Zeit benötigt die Zink-Luft-Batterie zur vollständigen Aufladung.

Nach dem Schließen des Batteriefachs gibt es eine Startverzögerung von einigen Sekunden gefolgt von einem Warnton, der anzeigt, dass das Gerät betriebsbereit ist.

Die Batterielaufzeit beträgt normalerweise eine bis zwei Wochen. Verwenden Sie ausschließlich neue Zink-Luft-Batterien in Größe 13 (auch als PR48 bezeichnet).

Anbringen des Klebeadapters

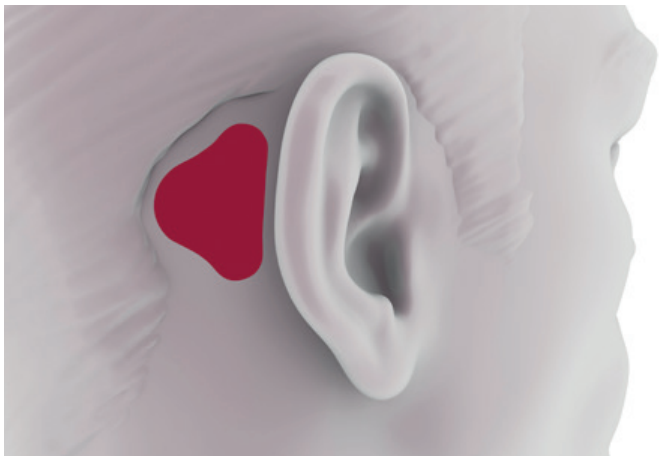

1. Die Haut hinter dem Ohr muss **sauber, trocken und unbehaart sein**. Ist die unbehaarte Stelle nicht groß genug für den Klebeadapter, rasieren Sie die Stelle entsprechend.

2. Reinigen Sie die Haut mit einer milden Seife **und lassen Sie sie vollständig trocknen** bevor Sie den Klebeadapter anbringen.







! Die optionale Positionierungshilfe kann dabei helfen, den Klebeadapter richtig zu positionieren.

3 Platzieren Sie den Klebeadapter in der Aussparung der Positionierungshilfe.

4 Entfernen Sie die Schutzfolie. **Berühren Sie nicht die Klebefläche.**

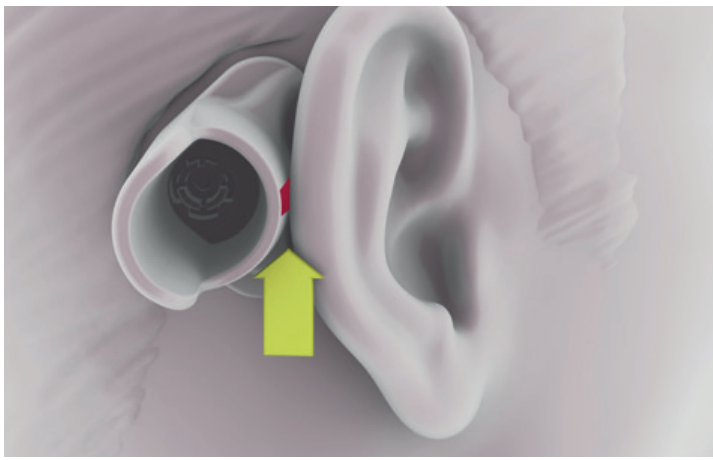


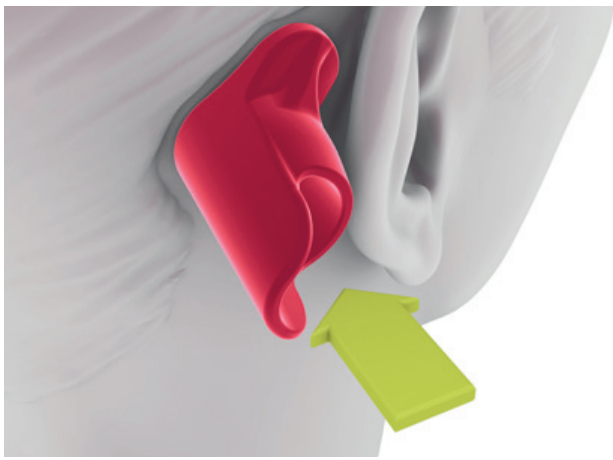


! Stellen Sie sicher, dass der Befestigungsbereich unbehaart ist (siehe Seite 5) und streichen Sie die Haare aus dem Befestigungsbereich.

5 Suchen Sie die richtige Position, bei der die Positionierungshilfe das Ohr leicht berührt. Der Klebeadapter muss über dem Knochen positioniert sein.

6 Drücken Sie die Positionierungshilfe fest nach unten.

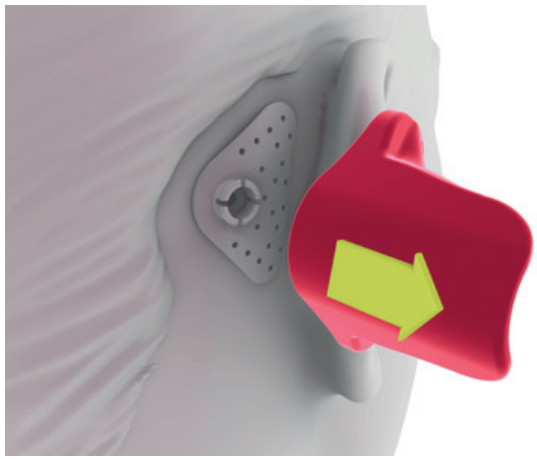


7 Entfernen Sie die Positionierungshilfe vorsichtig, indem Sie sie von der Haut wegbewegen. Ziehen Sie beim Entfernen der Positonierungshilfe nicht am Klebeadapter.

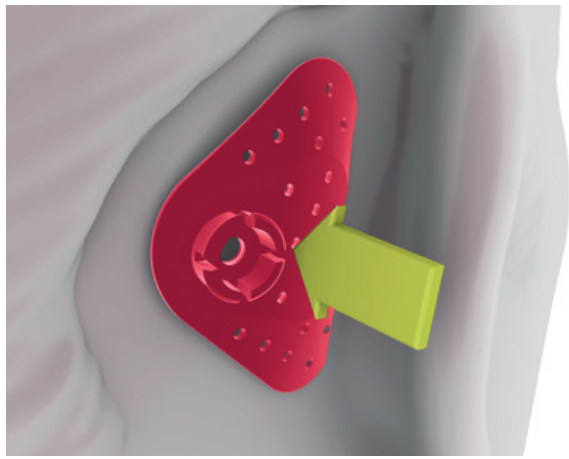


8 Drücken Sie mindestens 30 Sekunden lang fest auf die gesamte Oberfläche des Klebeadapters.

Anbringen des Audioprozessors

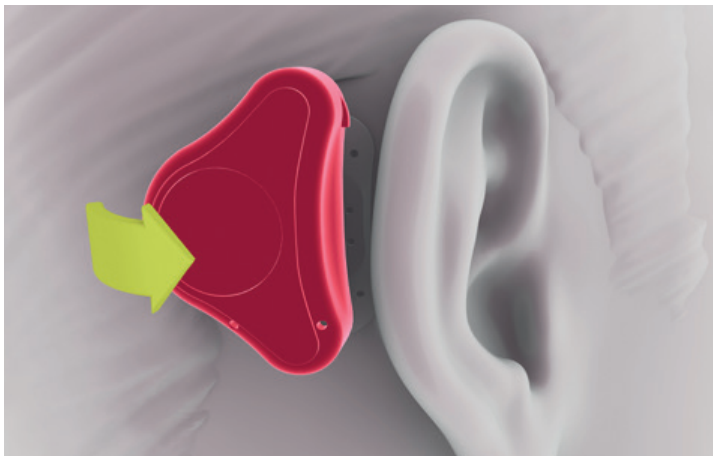


1 Finden Sie die richtige Position und setzen Sie den Audioprozessor gekippt auf die Klickverbindung während Sie auf den Klebeadapter drücken.

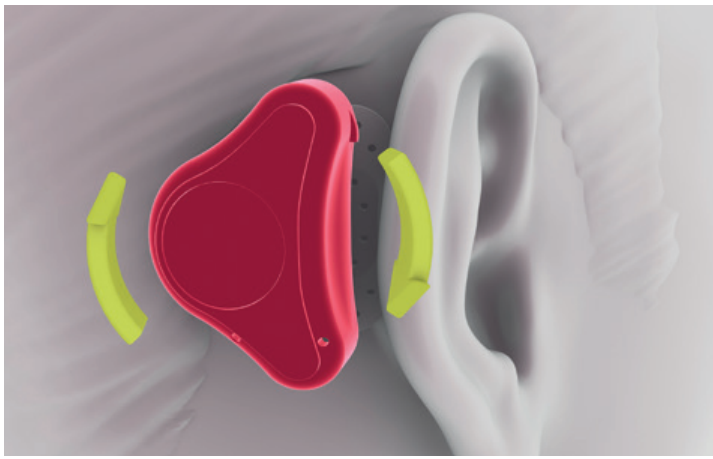


2 Durch Drücken und Drehen des Audioprozessors kann die Position leicht angepasst werden. Damit der Audioprozessor optimal funktioniert, darf er das Außenohr nicht berühren.

Abnehmen des Audioprozessors

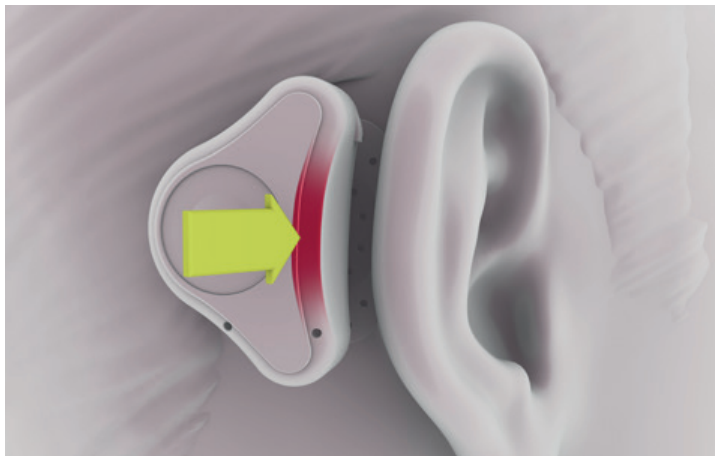


1 Zum Entfernen des Audioprozessors vom Klebeadapter kippen Sie ihn zu Ihrem Ohr.

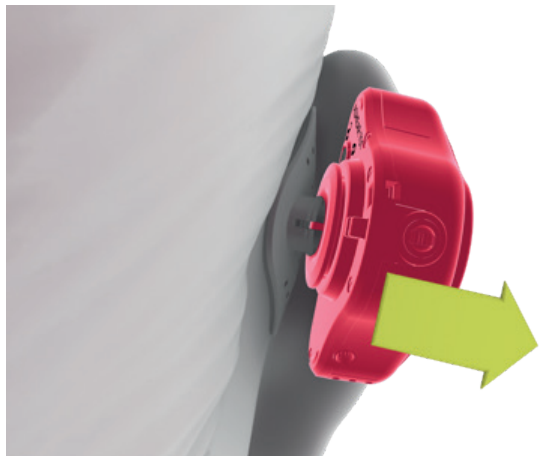

2 Entfernen Sie den Audioprozessor vorsichtig und ziehen Sie nicht am Klebeadapter.

Wechseln des Klebeadapters

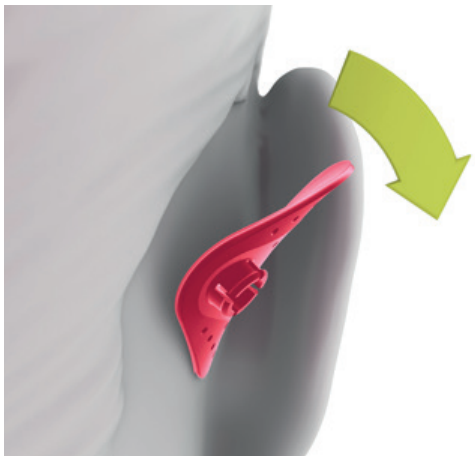


Ziehen Sie den Klebeadapter zum Entfernen langsam von der Haut ab. In der Regel kann der Klebeadapter Tag und Nacht getragen und sollte ein- oder zweimal pro Woche gewechselt werden. Der Klebeadapter ist nur zum Einmalgebrauch.

Ändern des Programms



Drücken Sie den Programmwahlknopf, um das Programm zu ändern.
Beim Einschalten startet der Audioprozessor immer in Programm 1.

Ändern der Lautstärke

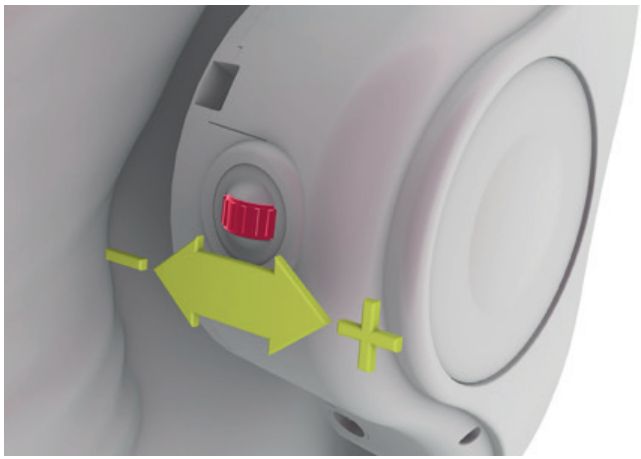

Drehen von der Haut weg erhöht die Lautstärke.

Drehen zur Haut senkt die Lautstärke.

Änderungen der Lautstärke werden durch einen Piepton angezeigt.

Verbinden des ADHEAR mit externen Geräten



ADHEAR kann an verschiedene externe Geräte, wie FM-Anlagen, Telespulen-Empfänger oder Smartphones angeschlossen werden. Schließen Sie das Audioeingangskabel and das externe Gerät und den Audioprozessor an. Die Punkte auf dem Kabel und der Unterseite des Audioprozessors müssen übereinstimmen.

ADHEAR Zubehör



Halteklipp

Der Halteklipp kann über eine Schlaufe mit dem Audioprozessor verbunden werden. Der Klipp kann an der Kleidung befestigt werden. Der Halteklipp wird bei körperlicher Aktivität, Sport, Spiel und ähnlichen Situationen empfohlen, bei denen das Gerät herunterfallen könnte.



ADHEAR Hülle

Die ADHEAR Hülle bietet zusätzlichen Schutz, besonders für junge Nutzer. Ziehen Sie sie einfach über den Audioprozessor.

Pflege des ADHEAR Systems

Folgen Sie diesen grundlegenden, jedoch wichtigen Pflegeanleitungen, um Ihr ADHEAR System zu warten.

Reinigung

Die Gehäuseaußenseite kann mit weichen Feuchttüchern gereinigt werden. Reinigen Sie das Gehäuse nicht in oder unter Wasser, damit kein Wasser in den Audioprozessor eindringt. Die Kupplungsplatte sollte einmal pro Woche mit der mitgelieferten Reinigungsbürste gereinigt werden, um Verschmutzungen innerhalb der runden Kupplungsplattenrille zu entfernen. Die Spalte zwischen Gehäuse und Kupplungsplatte sollte ebenfalls mit der Reinigungsbürste gereinigt werden.

Lagerung

Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche auf, wenn Sie es nicht verwenden. Sie können die Batterie aus dem Audioprozessor entnehmen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Wird der Audioprozessor längere Zeit nicht genutzt, sollte die Batterie grundsätzlich entfernt werden, da sie auslaufen und den Audioprozessor beschädigen könnte.
Bewahren Sie die Klebeadapter an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur auf.

Trocknung

Wenn Sie in einem feuchten Klima leben oder zu übermäßiger Schweißbildung neigen, sollten Sie den Audioprozessor nicht in der Aufbewahrungstasche, sondern in einem (separat erhältlichen) Trockenbehälter aufbewahren, wenn Sie ihn nicht tragen.

! Lesen Sie Ihre Gebrauchsanweisung für weitere Informationen zur Reinigung, Lagerung, Handhabung und Entsorgung des ADHEAR Systems.

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a, 6020 Innsbruck, Austria
office@medel.com

medel.com